




Septal Occluder

Estudos pré-clínicos**

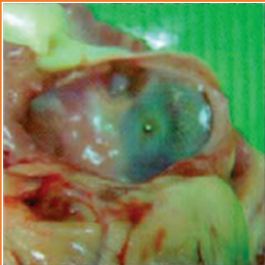


Neo Endotelização na superfície atrial esquerda do dispositivo aos 36 dias após o implante



Neo endotelização na superfície atrial esquerda do dispositivo aos 42 dias após o implante




Neo endotelização na superfície atrial direita do dispositivo aos 36 dias após o implante

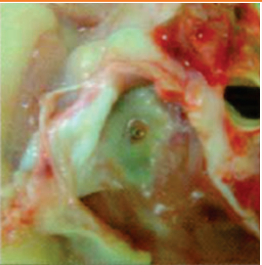


Neo endotelização na superfície atrial direita do dispositivo aos 42 dias após o implante


Caso clínico**

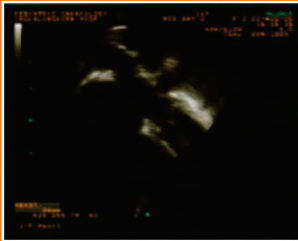

Pré-fechamento - tamanho ASD de 26 mm

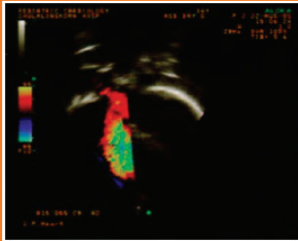

Pré-fechamento - shunt esquerda-direita por doppler colorido

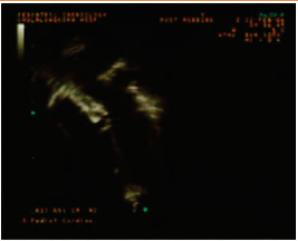

Vista de quatro câmaras mostrando o fechamento completo do ASD - 180 dias após a implantação do dispositivo Cocoon



Visão de eixo curto paraesternal mostrando o fechamento completo do ASD - 180 dias após o implante do dispositivo Cocoon

Informações sobre pedidos

Código do produto	Bainha (F)	Número de catálogo do conjunto de acessórios Cocoon	Número de catálogo do cabo de entrega Cocoon
COA08	6-7	COA6F / COA7F	CDC6F
COA10	6-7	COA6F / COA7F	CDC6F
COA12	8-9	COA8F / COA9F	CDC6F
COA14	8-9	COA8F / COA9F	CDC6F
COA16	8-9	COA8F / COA9F	CDC6F
COA18	10-12	COA10F / COA12F	CDC6F
COA20	10-12	COA10F / COA12F	CDC6F
COA22	10-12	COA10F / COA12F	CDC6F
COA24	10-12	COA10F / COA12F	CDC6F
COA26	10-12	COA10F / COA12F	CDC6F
COA28	10-12	COA10F / COA12F	CDC6F
COA30	12-14	COA12F / COA14F	CDC6F
COA32	12-14	COA12F / COA14F	CDC6F
COA34	12-14	COA12F / COA14F	CDC6F
COA36	12-14	COA12F / COA14F	CDC6F
COA38	12-14	COA12F / COA14F	CDC6F
COA40	12-14	COA12F / COA14F	CDC6F
COA42**	14	COA14F	CDC6F

ASD: Defeito do Septo Atrial
1- Hellenic J Cardiol. 2021 de maio; 62 (3): 206-211 / 2. Medicamento. 2019 março; 98 (10) / 3- Int J Cardiol. 15 de dezembro de 2014; 177 (2): 418-22 / 4- Catheter Cardiovasc Interv. 1º de setembro de 2015;86 (3) *Dados sobre os testes de pesquisa e desenvolvimento do arquivo SMT realizados usando oclusores septais de 26 mm para ambos os dispositivos. Os resultados do teste são uma média do teste realizado três vezes. **Não disponível para uso em países com marcação CE.
*A recaptura e recolocação só são possíveis se o cabo de entrega estiver firmemente conectado ao disco.

Cuidado: Este produto deve ser usado por ou sob a orientação de um médico. Antes de usar, consulte as "Instruções de uso" fornecidas com esses dispositivos para indicações, contra-indicações, efeitos colaterais, advertências de procedimento sugerido e precauções. Como parte de nossa política de desenvolvimento contínuo de produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações do produto sem notificação prévia. As informações aqui contidas são para distribuições fora dos EUA e Japão.
Verifique o status regulamentar do dispositivo antes da distribuição em áreas onde a marcação CE não é o regulamento em vigor. Testes realizados e dados arquivados na Sahajanand Medical Technologies LTD (SMT). As ilustrações são apenas representações artísticas e não devem ser consideradas como desenhos de engenharia ou fotografias. Fotos arquivadas na Sahajanand Medical Technologies LTD.

O Ocluser Septal Cocoon é fabricado pela Vascular Innovations Co. Ltd Thailand, uma empresa do grupo SMT. Cocoon é uma marca comercial da Vascular Innovations Co. Ltd.
Atualmente, a linha de oclusores Cocoon não é aprovada pela USFDA e não está disponível para venda nos EUA.

Aviso legal: © 2024 Sahajanand Medical Technologies LTD - Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a modificações, revisões e melhorias.

Escritório registrado: Sahajanand Medical Technologies LTD
Sahajanand Estate, Wakharia Wadi, Near Dahhohi Char Rasta, Ved Road, Surat
395004, Gujarat, INDIA Tel: +91 261 6112800 Fax: +91 261 6112801
• CIN: U33119GJ2001PLC040121 • www.smtpl.com






Septal Occluder

Projetado para minimizar a lixiviação de níquel
Revestimento de platina

- Uma camada ultrafina de **átomos de platina**, usando **tecnologia de nanofusão**, reveste o fio de nitinol por um processo chamado deposição de plasma
- O **revestimento de platina** torna os Cocoon Occluders inertes, biocompatíveis, não corrosivos e não alérgicos, além de aumentar a radiopacidade

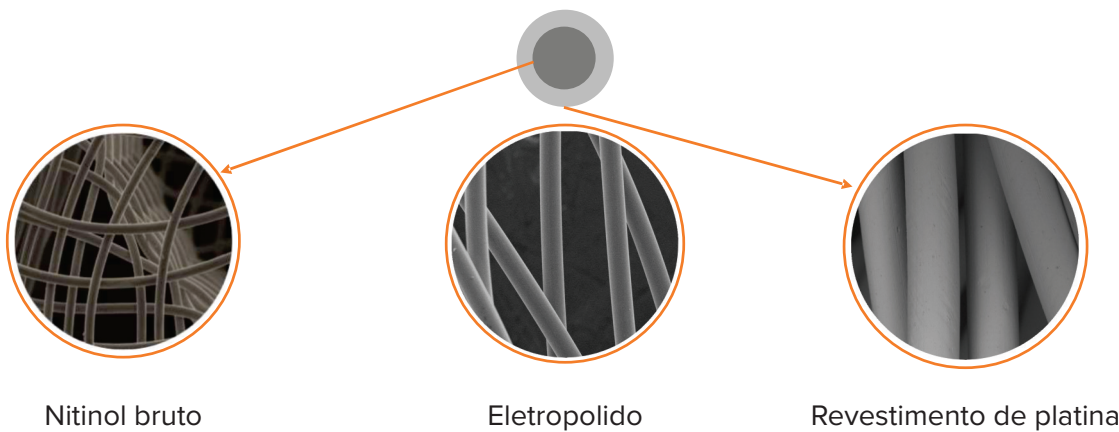

O revestimento de platina torna os
Oclusores Cocoon:

Bio-compatíveis


Não corrosivos

Não alérgicos

Mais radiopacos



Septal Occluder

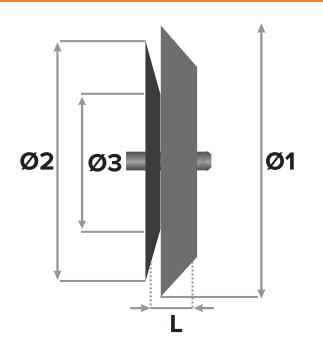

Design:
Diâmetro do disco atrial esquerdo (Ø1)
Tamanho do dispositivo (Ø3)
Diâmetro do disco atrial esquerdo (Ø2)
Comprimento da cintura (L)

Especificações técnicas

Código do produto	Tamanho do dispositivo Ø3 (mm)	Diâmetro do disco atrial esquerdo Ø1 (mm)	Comprimento da cintura L (mm)	Diâmetro do disco atrial direito Ø2 (mm)	Bainha (F)
COA08	8	20	3	18	6-7
COA10	10	22	3	20	6-7
COA12	12	26	4	22	8-9
COA14	14	28	4	24	8-9
COA16	16	30	4	26	8-9
COA18	18	32	4	28	10-12
COA20	20	34	4	30	10-12
COA22	22	36	4	32	10-12
COA24	24	38	4	34	10-12
COA26	26	40	4	36	10-12
COA28	28	42	4	38	10-12
COA30	30	44	4	40	12-14
COA32	32	46	4	42	12-14
COA34	34	50	4	44	12-14
COA36	36	52	4	46	12-14
COA38	38	54	4	48	12-14
COA40	40	56	4	50	12-14
COA42**	42	58	4	52	14

Comprimento utilizável de acessórios compatíveis (cm)

	6F	7F	8F	9F	10F	12F	14F
Bainha	60	60	78	78	78	78	78
Dilatador	66	66	84	84	84	84	84
Carregador	9	9	9	11	11	13	13

Cabo de entrega

Número de catálogo	Perfil	Comprimento	Tamanho
CDC6F	0.077"	117 cm	6F

